


特別な設計対応 産学交流 異業種交流など 協業化事業に積極対応

- オーダーメイド設計が真骨頂の日本医化 あらゆるニーズにフレキシブルに対応!
- 何かの製品を組み込みたい。ワークステーションキャビネットとして用いたい!
- あらゆるニーズを1台単位から設計&製造に取り組みます!

弊社が近年、力を入れている異業種との協業化。自社でのオーダーメイド設計&製造機能を武器に各種の要望を取り入れ、特別設計&製造体制に取り組んでいます。

近年、あらゆる業種でバイオハザードやケミカルハザードの対策、清浄環境の保持等への要求が高まっています。クリーン環境や局所的な保護環境を保持したいという理由から、クリーンベンチや特殊バイオハザード対策用クラスIIキャビネットなどを局所的ワークステーションとして用いたいという要望も増えています。

弊社はおお客様のご要望への確に対応します。“このようなことができないか”などご希望がございましたら、最寄の営業所にお声掛けください。あらゆるニーズに積極的に対応します。

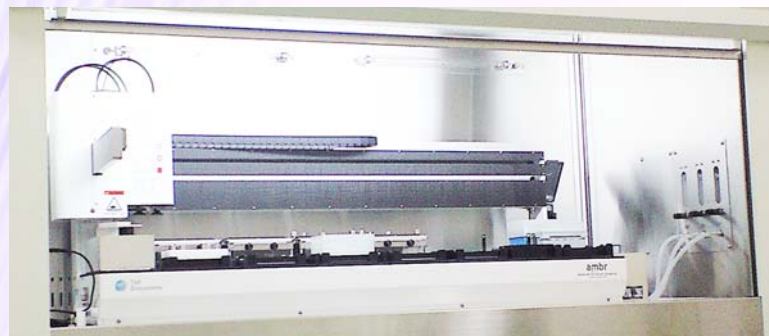

【対応の内容要点】

1. 設置有効寸法の拡大: 有効間口、有効奥行、有効高さ寸法の拡大などにより設置予定機器への配慮する
2. 耐荷重などの強化: 負荷重量の大きいものでも設置できるようにワークエリアのテーブルを強化する
3. ガス要求設備の対応: 窒素、炭酸ガス、酸素などの要求ガスに対応した設備の設置、流量計の装備等を考慮する
4. バキュームの設置: 必要な場所にバキューム設備の設置を配慮する
5. 必要コンセントの設置: 設置機器に対応した必要コンセント設備を適切な場所に設置する
6. 圧縮空気の設置: ワークエリア内に必要な圧縮空気の設備を付加する
7. 連結タイプのバイオハザード対策用クラスIIキャビネットの設置:
作業内容&エリアに対応し、バイオハザード対策用クラスIIキャビネットを連結する
8. 給水設備を付設: ワークエリア内の必要な場所に給水設備を付設する
9. パスボックスの設置: バイオハザード対策用クラスIIキャビネットの側面にパスボックスを取り付ける

【参考事例1】

“粒子特性分析装置組み込み事例”

計測の精度&性能を保持した環境下

粒子特性分析装置を組込む為、清浄&陰圧空間の確保とともに

(1)有効奥行寸法の拡張

(2)有効高さ寸法の拡張

(3)エア配管・給水接続口・バキューム口取付

利便性、メンテナンス性、機能性の向上をはかりました



【参考事例2】

“製薬会社向け計測機器組込事例”

計測の精度&性能を保持した環境下

粒子特性分析装置を組込む為、清浄&陰圧空間の確保とともに

(1)ニードルバルブ付ガス流量計 装備

窒素・酸素・炭酸ガス

(2)USBアダプタ装備

(3)バキューム、ガスバーナー、ACコンセント装備

利便性、メンテナンス性、機能性の向上をはかりました



NKsystem Bio & Clean 研究設備・機器

株式会社 日本医化器械製作所

部署：

担当：

□ 本 社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22番38号
info@nihonika.co.jp ☎ 06-6443-0712(代) FAX: 06-6445-7641

□ 東 京 支 店 〒183-0015 東京都府中市清水ヶ丘1丁目3番地8
tokyo@nihonika.co.jp ☎ 042-365-3245(代) FAX: 042-367-0382

□ 東京支店本郷オフィス 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目24番6号
tokyo_hongoh@nihonika.co.jp ☎ 03-6240-0003(代) FAX: 03-6240-0009

□ 札 幌 支 店 〒065-0028 札幌市東区北28条東18丁目5番5号
sapporo@nihonika.co.jp ☎ 011-786-7203(代) FAX: 011-786-7204

□ 仙 台 営 業 所 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目1番15号
sendai@nihonika.co.jp ☎ 022-349-9525(代) FAX: 022-349-9794

□ つ く ば 営 業 所 〒305-0005 茨城県つくば市天久保3丁目10番12号
tsukuba@nihonika.co.jp ☎ 029-855-7401(代) FAX: 029-855-7403

□ 名 古 屋 営 業 所 〒453-0809 名古屋市中村区上米野町4丁目24番地
nagoya@nihonika.co.jp ☎ 052-451-7922(代) FAX: 052-451-7924

□ 福 岡 営 業 所 〒813-0034 福岡市東区多の津4丁目19番1号
fukuoka@nihonika.co.jp ☎ 092-611-0530(代) FAX: 092-621-9268

□ 広 島 出 張 所 〒739-0015 広島県東広島市西条栄町10番30号
hiroshima@nihonika.co.jp ☎ 082-427-6789(代) FAX: 082-427-6790

□ 羽 曳 野 工 場 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷5番47号
☎ 072-958-1919(代) FAX: 072-956-1345

ホームページはこちら ▶▶▶

<http://www.nihonika.co.jp>

● 当カタログの無断転載を禁じます。 ● 当カタログ掲載品は、改良などにより外装・仕様などを変更する場合があります。

● 本シリーズは、特許・実用新案権等取得及び申請中です。類似品にはご注意ください。

● 詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。 ● 製品をご購入の際は、あらかじめ、弊社営業担当者と十分に内容をご確認ください。

2014. 08. 20/O